

DENTAL TECHNOLOGY

CATALOGUE

Densell[®]

easydent
dental products

GDK[®]



ETCHING GEL

Gel ácido



Foto: FullBondig

Densell[®]



CÓD. 1533 *Low viscosity*
ETCHING GEL LV 37% GREEN
Syringe 12g
Jeringa 12g

CÓD. 1536 *Medium viscosity*
ETCHING GEL MV 37%
BLUE
Syringe 3g
Jeringa 3g

CÓD. 1537 *Medium viscosity*
ETCHING GEL MV 35% BLUE
Giant syringe 12g / Jeringa gigante 12g

CÓD. 1538 *High viscosity*
ETCHING GEL HV BACTER 35%
OPAQUE BLUE 5g

CÓD. 1534 *Low viscosity*
ETCHING GEL LV 37% GREEN
Syringe 12g + Tips
Jeringa 12g + Puntas

CÓD. 1536-3
3 syringes 3g
3 jeringas 3g

CÓD. 1537-X *Medium viscosity*
ETCHING GEL MV 35% BLUE
Giant syringe 12g + tips
Jeringa gigante 12g + Puntas

CÓD. 1538-12 *High viscosity*
ETCHING GEL HV BACTER 35%
OPAQUE BLUE 12g

PORCELAIN CONDITIONER



CÓD. 1539
GEL ÁCIDO FLUORHÍDRICO 10%
JERINGA 2.5ml

HYDROFLUORIC ACID GEL 10%
2.5ml SYRINGE

CÓD. 1541
GEL ÁCIDO FLUORHÍDRICO 5%
JERINGA 2.5ml

HYDROFLUORIC ACID GEL 5%
2.5ml SYRINGE

Desilicate *Feldspar*
Desilicato *Feldespató*

- Porcelain conditioner, for repairs and as an adhesion promoter.

- Acondicionador de porcelana, para reparaciones y como promotor de la adhesión.



- Leaves the surface suitable for placing adhesives of composite for subsequent repair or cementation.

- Deja la superficie apta para colocar adhesivos de composite para su posterior reparación o cementación.



CÓD. 1540
PORCELAIN PRIMER
 SILANE
 5 ml

Coupling agent for enhancing adhesion between indirect metal/ceramic restorations and composite resins, as well as for intraoral repairs in cases of pre-existing rigid restorations fractures.

Agente para incrementar la adhesión entre restauraciones indirectas de metal/cerámica y resinas compuestas, así como para reparaciones intraorales en casos de fracturas de restauraciones rígidas preexistentes.



CÓD. 1560
MONOBOND
DENTAL PRIMER
 Ceramic + Zirconia
 + Disilicate + Metal
 3 ml

MDP

Primer solution for treating surfaces that promotes better adhesion to ceramic, composites and metal alloys for use in dentistry. The different ceramics are: conventional + lithium disilicates + zirconia + hybrid ceramics. Contains the adhesive molecule MDP.

Solución imprimadora de superficies de prótesis que promueve una mejor adhesión a las superficies de cerámica, composites y aleaciones metálicas de uso en odontología. Las distintas cerámicas son: convencionales + disilicatos de litio + zirconia + cerámicas híbridas. Contiene la molécula adhesiva MDP.



CÓD. 1551
MONOBOND 7 SE
UNIVERSAL
CONCENTRATED
 5 ml

MDP

SELF-ETCH 7th Generation one-component universal adhesive self-etching one-bottle. Contains MDP and nano-reinforcements / nanofiller for structural reinforcement. Light-curing for resin-modified composites-compomers-ionomers and resin-based cements. Pure solvent-free adhesive, does not contain acetone or ethanol.

Adhesivo universal SELF - ETCH. Monocomponente de 7a Generación autograbante de un solo frasco. Contiene MDP y nanore-fuezos / nanofiller para refuerzo estructural. Fotopolimerizable para composites-compómeros - ionómeros modificados con resina y cementos a base de resina. Adhesivo puro sin solventes, no contiene acetona ni ethanol.



CÓD. 1548
ENAMEL BOND
 5 ml

Water repellent ADHESIVE to apply OVER hydrophilic adhesive before composite.

Adhesivo hidrófugo para aplicar sobre el adhesivo hidrofílico previo al composite.



CÓD. 1542
MONOBOND
CONCENTRATED
 5 ml

UNIVERSAL light cure ADHESIVE. It does not have acetone or alcohol. Used to generate adhesion between RESTORATIVE materials and dental tissue. Concentrated.

Adhesivo universal monofrasco. Fotocurado. Sin alcohol ni acetona. Para generar la adhesión entre los materiales de restauración y de los tejidos dentales. Concentrado.



CÓD. 1543
MONOBOND AT
 5 ml

UNIVERSAL ADHESIVE enamel - dentin acetone vehicle.

Adhesivo universal esmalte - dentina vehículo acetona.



CÓD. 1545
MONOBOND ET
 5 ml

UNIVERSAL ADHESIVE enamel- dentin. Curing of great covering power ethanol vehicle.

Adhesivo universal esmalte - dentina. Fotocurado de gran poder cubritivo vehículo etanol.

Composites

HYBRILUX NANO



CÓD. 1514

KIT 6 SYRINGES + MONOBOND + ETCH GEL

CÓD. 1515

SYRINGE 4g / JERINGA 4g
A1, A2, A3, A3.5, B2,
Bleach, C2

CÓD. 1516

DENTINA OPAQUE
SYRINGE 4g / JERINGA 4g
A2, A3

Aesthetic nanofiller material for restorations. Offers optimal properties and excellent aesthetic results with the best polishing capacity. Great handling and excellent color stability. Radiopaque, light curing, UNIVERSAL nano-hybrid composite with superior strength, abrasion resistance, and high gloss polishing for anterior and posterior teeth restoration. Contains fluoride. Layering technique: dentin and enamel. Based on BIS-GMA resin and inorganic filler particles of 0.05 to 0.7 µm.

Indicated:

- Anterior restorations (Class III, IV and V)
- Posterior restorations (Class I and II)

HYBRILUX MICROHYBRID



CÓD. 1510

SYRINGE 4g / JERINGA 4g
A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, Incisal

CÓD. 1510

KIT 5 SHADES - KIT 5 COLORES
A1, A2, A3, A3.5, Incisal
+ Bond + Etching Gel

ANTERIOR & POSTERIOR RESTORATIONS

Anterior-posterior light cured composite with fine particles for better clinical results and high content of charge. Resistant to abrasion and non ADHESIVE consistency.

ANTERIOR RESTORATIONS

Aesthetic polishing due to its fine particles. Great color stability after setting.

POSTERIOR RESTORATIONS

Great resistance to erosion and compression. 75% ceramic reinforcement. Great color stability. Aesthetic polishing translucency.

INDICATED

Direct resoration for CAVITIES class I, II, III, IV and V.

HYBRILUX POSTERIOR



CÓD. 1523

SYRINGE 4g JERINGA 4g
A1, A2, A3, A3.5

High-density posterior light-curing composite. **Indications:**

Restorations Direct in posterior Class I and II including occlusal surfaces.

Core Reconstruction - splinting - indirect restorations photo-cured in

laboratory polymerizers with light and heat. **Advantages:** Exceptional

handling characteristics - Non-sticky. Excellent resistance and low wear.

Very low shrinkage at polymerization. Fast cure in 2-3mm increments.

POLISHERS

UNIVERSAL SILICONE

For Porcelana, Composite, Metales, Acrílico



760

11x2.5mm

761

5x10mm

762

3x7.5mm

763

7x10mm



Medium grit - Grano medio

COMPOSITE POLISHING

For Composite Nano e Híbridos



764

5x10mm

765

7x10mm

766-413

10x2.5mm

766-418

3x7.5mm



Fine grit - Grano fino

GREEN SILICONE

For Pocolana, Acrílico, Metal, Composite



767

5x10mm

768

5x10mm

769

14x1.6mm



Fine grit - Grano fino

**FOR DENTAL
PROPHYLAXIS**



781

6 alveolos
internos

HYBRILUX FLOW



Fluid composite. Suitable for restoration: Class V, abstractions, erosions and resilient basis in deep preparations.

Composite fluido. Indicado para restaurar: Clase V, abfracciones, erosiones y como base resiliente en preparaciones profundas.

CÓD. 1519
KIT 4 SHADES
4 COLORES 1g
A1, A2, A3, A3.5

CÓD. 1520
SYRINGE 1g
JERINGA 1g
A1, A2, A3, A3.5

X100

Universal hybrid light-curing composite reinforced with nanoparticles



easydent
dental products

CÓD. 1460
SYRINGE 4g / SYRINGE 4g
A1, A2, A3, A3.5

X200 FLOW

Universal hybrid light-curing flow composite reinforced with nanoparticles



CÓD. 1470
SYRINGE 1.5g / SYRINGE 1.5g
A1, A2, A3,

Light-curing composite resin. with nanotechnology.

Advantages: Adequate consistency, Natural fluorescence and opalescence. Great packability and highly moldable.

Indications: Direct restorative on anterior and posterior teeth. Direct reconstructions of class I, II, III, IV and V. Corrections aesthetic. Support of teeth with mobility. Indirect restorations including "inlays", "onlays" and facets.

Color stability. Compatible with all adhesives 40 a 60" curing and dual monobond.

MATRIX

Matriz

728 Matriz tira poliester 8mm x 100 unidades - Strip

730 Matriz seccional kit 48 matrices+1 aro porta-surtidas

732 Matriz rollo acero 7mm x 3metros - Matrix roll



CÓD. 730



CÓD. 728



CÓD. 732

DENTAL DAM

Goma Dique

CÓD. 5720 • 5x5
FINA 0.14mm
12.7cm x 12.7cm
x 52 azul


CÓD. 5725 • 5x5
MEDIUM 0.18mm
12.7cm x 12.7cm
x 52 verde

CÓD. 5726 • 6x6
MEDIUM 0.18mm
15.2 x 15.2cm
x 36 verde

CÓD. 5730 • 6x6
GRUESO 0.22mm
15.2 x 15.2cm
x 36 azul


POLISHING PASTE

Pasta para pulir

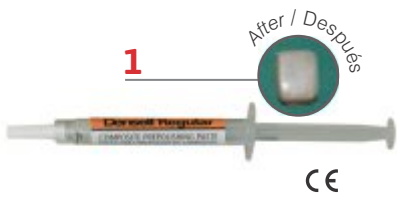


CÓD. 753
REGULAR PREPOLISH 4g

Regular and prepolish polishing paste. Prepares surfaces for the high gloss. Para pulido regular y prepulido, saborizada. Trata las superficies preparándolas para el alto brillo.

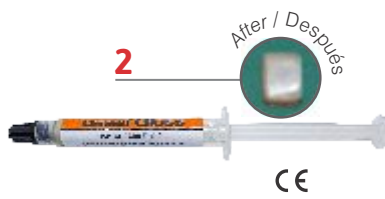

CÓD. 752
GLOSS FINE 4g

Polishing paste for polishing composite restorations. Gloss and polish simultaneously. Pasta para pulir restauraciones de composites. Sabor menta. Brillo y pulido simultáneo.

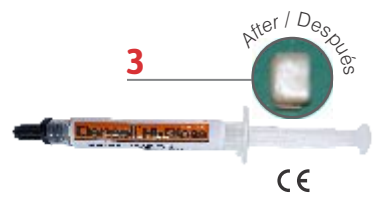

CÓD. 751
HI-GLOSS DIAMOND 3g

Polishing paste designed to GIVE a final polish and high shine to different types of restorations. Pasta para pulir restauraciones de composites a alto brillo, a base de partículas microfinas.

POLISHING STRIP



CÓD. 966 CE
DUAL UNIVERSAL
DENSELL
100 units
fine + medium

CÓD. 967 CE
DUAL COLOR
DENSELL
100 units
assorted

CÓD. 968
DUAL FLEXISTRIP
DENSELL
50 units
assorted

CÓD. 969
DUAL COLOR
EASYDENT
100 units
assorted

COMPOSNAP

Center Free universal polishing discs
Pulidores universales de centro libre



Discs with color-coded granulometry / 12mm.
Discos con granulometría identificada por color.

630-C Coarse / grueso (blue) x100

630-M Medium / medio (red) x100

630-F Fine / fino (yellow) x100

630-XF x fine / extrafino (white) x100

628 Kit 24 assorted discs + metallic mandrel
Surtido 24 unidades + mandril metálico

629 Kit 40 assorted discs without mandrel
Surtido 40 unidades sin mandril

COMPOFLEX



Composite polishing discs, coarse, medium, fine and x-fine.
Discos para pulir composite, de grano grueso, medio, fino y extrafino. 15.5mm

616 Kit 40 discs + metallic mandrel

617 Assorted surtidos 40 units. Sin mandril

COMPOFLEX MINI



Composite polishing mini-discs, coarse, medium, fine and x-fine
Mini discos para pulir composite, de grano grueso, medio, fino y extrafino.

618 Kit 40 discs + metallic mandrel. 12.5mm

619 Assorted surtidos 40 units. Sin mandril 12.5mm

625 Snap-On Kit 40 discs + mandrel. 12mm
Densell
easydent

MANDREL

Mandril



CÓD. 733
MANDRIL CA MINI
MOORE 2x2mm
USO COMPOFLEX



CÓD. 734
MANDRIL CA
SNAP-ON METÁLICO
USO COMPOSNAP



CÓD. 735
MANDRIL CA ACERO
NIQUEL



CÓD. 739
MANDRIL CA
MOORE 3x3mm

WEDGES

Cuñas



CE

CÓD. 280

WOODEN / MADERA - 100 units
Anatomic shape and square end. 3 sizes assorted.
Forma anatómica y extremo cuadrado. 3 tamaños surtidas.



CE

CÓD. 285

TRANSLUX - 50 units
Anatomic shape, assorted.
Forma anatómica, surtidas.



CE

CÓD. 282

WOODEN / MADERA - 100 units
3 sizes assorted.
3 tamaños surtidas.
Easydent

PLASTIC BURS HOLDER

Fresero plástico



CÓD. 686

FG + CA FOR 42 BURS
FG + CA PARA 42 FRESAS
9.5x6x2cm

BRUSH WITH HANDLE

Cepillo con mango



CÓD. 232

ULTRABRUSH 100 pcs
Chemical-resistant bristle brush. Fixed folding, toughest material, more control

Pincel de cerdas resistentes para una mejor cobertura, porción plegable más resistente, de doblado fijo, más control.

APPLICATOR TIPS

Puntas cánulas aplicadoras



787-18 18/19 g Thick | Gruesa x100

787-20 20/21 g Medium | Media x100

787-22 22/23 g Fine | Fina x100

787-25 25 g x-Fine | Extra fina x100

ENDODONTIC IRRIGATION CANNULA

Cánulas para irrigación endodóntica



6005 Endo 25g x 25mm | Blue Azul x100

6006 Endo 27g x 25mm salida lateral | Grey Gris x100

6007 Endo-Perio 27g Punta Roma - orificios lateral x100

ALVODENSELL

Alveolar dressing



CÓD. 6508

12g JAR / POTE

Alveolar paste for the preventive and healthy Treatment of Alveolitis. Antiseptic, anesthetic and hemostatics properties to promote healing. Quick acting formula works over several hours without need for removal.

Pasta Alveolar para el tratamiento de la Alveolitis. Propiedades antisépticas, analgésicas y hemostáticas. Estimula la cicatrización. Actúa rápidamente ejerciendo su acción durante horas, eliminándose por sí sola sin necesidad de extraerla.

SURGICAL CEMENT

Cemento quirúrgico



CÓD. 6565

KIT - AVÍO
POWDER 50 g + LIQUID 20 ml
POLVO 50 g + LÍQUIDO 20 ml

Appropriate to be used in surgery or periodontic treatment.

Para ser usado en cirugía o tratamientos periodontales.

TRANSLUX TAPER POST 2%




CÓD. 4910
KIT 3 DRILLS / TALADROS
+ 20 POST / POSTES



CÓD. 4912
REFILL POST / REPUESTO POSTE
0.8/1.25 - 1.0/1.45 - 1.2/1.65



CÓD. 4915
REFILL DRILL / REPUESTO TALADRO
0.8/1.25 - 1.0/1.45 - 1.2/1.65

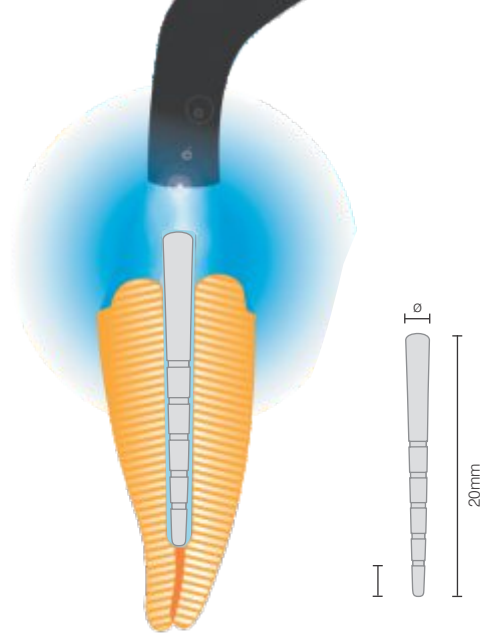

Densell Translucent Posts that transmit light and allow dual cements to polymerize and light curing. Preformed fiberglass posts and drills that precisely prepare the canal for a perfect fit and integration with the post. **Shape:** Tapered with 2% taper / taper. Ideal for canals treated with rotary instruments with 2% taper.

Postes Densell Translúcidos que transmiten la luz y permiten polimerizar los cementos duales y de fotocurado. Postes de fibra de vidrio preformado y taladros que preparan el conducto en forma precisa para una perfecta adaptación e integración con el poste. **Forma:** Cónica con taper / conicidad del 2%. Ideal para conductos tratados con instrumental rotativo con conicidad 2%.

POSTES | POSTS

GLASS POST CYLINDRICAL

Aesthetic fiberglass posts reinforced resin
Postes estéticos de fibra de vidrio reforzados con resina




CÓD. 4900
KIT 3 DRILLS / TALADROS
+ 20 POST / POSTES



CÓD. 4902
REFILL POST / REPUESTO POSTE
0.8-1.0-1.2-1.4



CÓD. 4905
REFILL DRILL / REPUESTO TALADRO
0.8-1.0-1.2-1.4

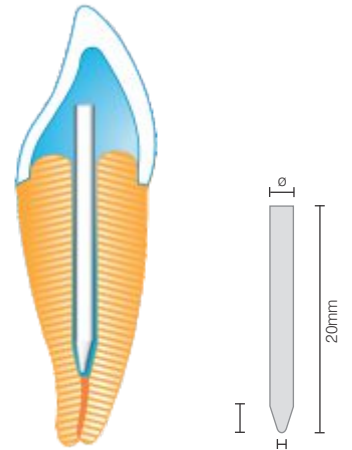

One office visit. Aesthetic, reinforced posts made of fiberglass with resin. Cylindrical passive form with conical apical sector. Elasticity similar to the dentine. Structure of longitudinal fibers. Absence of oxidation and corrosion. Chemo-mechanical compatibility between the post, cement, dentine, and core. Uniform distribution of force and absence of periodontal traumas. Minimum of root and post fracture. Easy removal of the post from root canal radiopaque.

Postes estéticos de fibra de vidrio reforzados con resina composite. Forma cilíndrica pasiva con sector apical cónico. Módulo de elasticidad similar a la dentina. Estructura de fibras longitudinales. Ausencia de oxidación y corrosión. Compatibilidad química mecánica entre el poste, el cemento, la dentina y el muñón. Distribución uniforme del esfuerzo y ausencia de traumas periodontales. Ausencia de fracturas de raíz y del poste. Fácil extracción del poste del canal.




TRANSLUX TAPER POST 2-4%

- 4920** Kit 3 taladros + 20 postes
- 4921** 0.5-1.2 taper - conicidad 2-4%
- 4922** 0.7-1.4 taper - conicidad 2-4%
- 4923** 0.9-1.6 taper - conicidad 2-4%

DRILL/TALADRO TRANSLUX 2-4%


- 4925** 0.5-1.2 cónico - taper
- 4926** 0.7-1.4 cónico - taper
- 4927** 0.9-1.6 cónico - taper

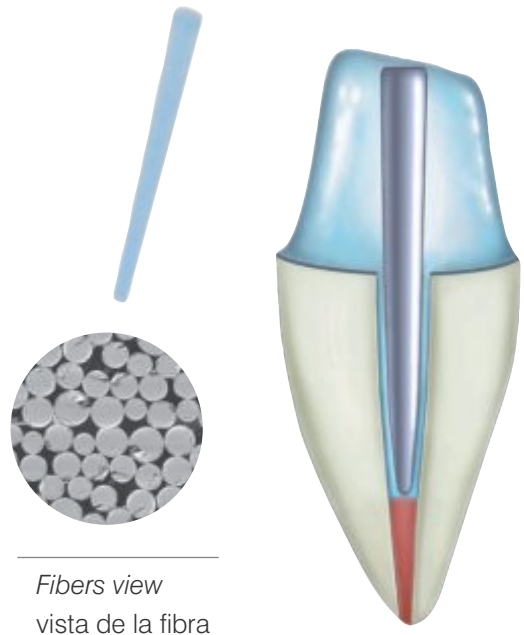

Fibers view
vista de la fibra

TRANSLUX OVAL POST

- 4931** 0.9-1.7 cónico - taper

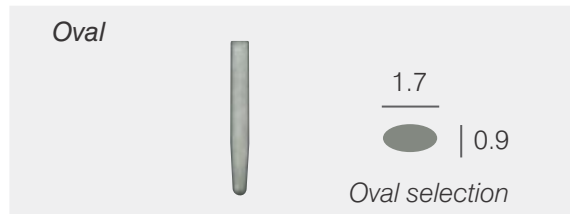

MATERIAL

MODULUS E (Gpa)

Stainless steel	190 - 210
Titanium	115
Zirconium	200 - 230
Carbon fiber	130 - 150
Dentin	18,6
Glass fiber	30 - 50

Modulus of elasticity comparison

Comparación módulo de elasticidad

Translucent Densell POSTS that transmit light and allow dual cements to cure and light curing, are used with Translux TaperPost drills of the same gauge.

Shape: conical with 2-4% taper / taper Ideal for canals treated with rotary instruments with 2-4% taper. DRILLS Densell TRANSLUX TaperPost 2-4%

Shape: conical with 2% taper / taper Ideal for canals treated with rotary instruments with 2% taper Constructed with maximum precision and High durability Steel for 30-50 uses.

Characteristics and advantages of DENSELL Fiber posts.

- Module of elasticity similar to 54 Gpa dentin.
- Absence of root fracture.
- Structure of long longitudinal fibers.
- Easy post removal.
- Extraordinary tensile strength 1900 Mpa.
- Superior physical.
- Mechanical properties.
- Bending strength 1400 Mpa.
- Compressive strength 360 Mpa.
- Absence of corrosion and oxidation.
- Stability and biocompatibility.

POSTES Densell Translúcidos que transmiten la luz y permiten polimerizar los cementos duales y de fotocurado, se utilizan con los taladros Translux TaperPost del mismo calibre.

Forma: cónica con taper/conicidad del 2-4%. Ideal para conductos tratados con instrumental rotativo con conicidad 2-4%. TALADROS Densell TRANSLUX TaperPost 2-4%.

Forma: cónica con taper/conicidad del 2%. Ideal para conductos tratados con instrumental rotativo con conicidad 2%. Constructuados con máxima precisión y Acero de Alta durabilidad para 30-50 usos.

Características y ventajas de los postes de Fibra DENSELL.

- Módulo de elasticidad similar a la dentina 54 Gpa.
- Ausencia de fractura de raíz.
- Estructura de Fibras largas longitudinales.
- Fácil remoción del poste.
- Extraordinaria Resistencia a la tensión 1900 Mpa.
- Propiedades físico.
- Mecánicas superiores.
- Resistencia a la flexión 1400 Mpa.
- Resistencia a la compresión 360 Mpa.
- Ausencia de corrosión y oxidación.
- Estabilidad y biocompatibilidad.

ENDO PREP



CÓD. 6574
SYRINGE 9g

Material for chemo-mechanical preparation of root canals. Helps to **DISSOLVE** calcifications; cleans and lubricates the canal for a better endo treatment, **AVOIDING** instrumental twisting or breaking. Also, allows the efficient use of electronic apex locators. **REMOVING** the pulpar debris of the root and **LEAVING** it clear thus being possible to see additional root canals. Whitening effect.

Material para la preparación química-mecánica de conductos. Ayuda a disolver la calcificación, limpia y lubrica el canal para una endodoncia más eficiente. Para instrumentación manual o mecanizada. Facilita el uso del localizador de ápice permitiendo la adecuada remoción de restos en los túbulos dentinarios y los canales quedan abiertos y limpios. Efecto blanqueador.

ENCAL 45 BIO CERÁMICO



CÓD. 6580
SYRINGE 2ml + TIPS
JERINGA 2ml + PUNTAS

Temporary paste with 45% calcium hydroxide. Bioceramic and bioavailable with zirconium. Highly radiopaque for endodontic use between sessions, as a temporary filler for prophylaxis, and as a direct pulp protector

Pasta temporaria a base de hidróxido de calcio al 45%. Biocerámico y biodisponible con Zirconio. Altamente radiopaco para uso endodóntico entre sesiones, como relleno temporario para la profilaxis y protector pulpar directo.

ENCAL 45

Radiopaco



With barium sulfate

CÓD. 6578-30

3 SYRINGE 2ml

CÓD. 6578 2ml

With zirconium oxide

CÓD. 6579

SYRINGE 2ml

CALCIUM HYDROXIDE PASTE. Flowable consistency paste, radiopaque pure calcium hydroxide 45%. Operatory uses: to protect direct or indirectly the pulp. Exposed to air it dries quickly. Endodontics use: as a temporary filling material. Disinfectant for endodontic prophylaxis in root canals.

HIDRÓXIDO DE CALCIO PASTA. Pasta de consistencia fluida con un 45% de hidróxido de calcio purísimo en suspensión acuosa. Excelente acción antibacteriana debido a su elevado pH, radiopaco y promotor de la formación de dentina de reparación. Indicado para: estimular la apexificación, obturación del conducto radicular entre sesiones endodónticas y protección pulpar directa.

PULP DEVITALIZER



CÓD. 6680
SYRINGE 3g

Quick action pulp **DEVITALIZER**. Arsenic-free formula with paraformaldehyde. Assures a rapid pain relief action.

Devitalizador pulpar de rápida acción, fórmula sin arsénico con paraformaldehído. Alivio rápido del dolor.

EDTA-C



CÓD. 6573
LIQUID 15ml

CÓD. 6577
GEL SYRINGE 9g

CÓD. 6585
EDTA - C 17%. LIQUID 500ml

Antibacterial chemical root enlarger for endodontic canals. Takes calcium ions from dentinal tissue to enlarge the canals. Bacteriostatic. Instruments lubricant.

Ensanchador de canales radiculares por acción química. Secuestra iones de calcio del tejido dentario ensanchando el canal. Bacteriostático. Lubricante de instrumental.

SILICONE STOPS

Topes de silicona



CÓD. 5700
100 units

Kit of 100 silicone stops for endodontic. Assorted colors.

Kit de 100 topes de silicona para endodoncia. Colores surtidos.

CE

IRRIGATION

Irrigación



CÓD. 6330
12ml ENDO punta curva



CÓD. 6331
1.2ml SILICONADA x10+10 cánulas



CÓD. 6333
3ml SILICONADA x20+20 cánulas



CÓD. 6335
12ml SILICONADA x20+20 cánulas

CÓD. 6330

3-part syringe, body, piston and plunger for irrigation. Clear body with applicator tip curve. Transparent silicone non-reactive plunger. Jeringa de 3 partes, cuerpo, pistón y embolo para irrigación. Cuerpo transparente con punta aplicadora curva. Embolo no reactivo de silicona transparente.

IODOFORMO



CÓD. 6621
20g

A potent antiseptic in powder form. Used in cases of alveolitis to create an aseptic environment. USE: Medicinal disinfectant for post-extraction treatment. Antiseptic treatment for pulpectomies in primary teeth. As a filling material for pulpectomies in combination with calcium hydroxide.

Antiséptico potente en forma de polvo. Utilizado en casos de Alveolitis para generar un medio aséptico. USO: medicación desinfectante para el tratamiento post-extracción. Para tratamiento antiséptico de pulpectomías en dientes primarios. Como material de obturación de pulpectomías en combinación con hidróxido de calcio.

ENDOAPEX



CÓD. 6576
SYRINGE 2.2g

CALCIUM HYDROXIDE PASTE WITH IODOFORM. Used as a radicular apexificator and a canal temporary restorative, it has bacteriostatic properties and releases calcium ions to occlude the radicular apex. Technique filling root canal without guttapercha points. Double filling method: Traditional and deciduos teeth.

HIDRÓXIDO DE CALCIO EN PASTA CON IODOFORMO. Restaurador temporario de conductos, promotor de la apexificación. Libera iones de calcio para la oclusión del ápice radicular. Indicado para el llenado del canal radicular sin punta de gutapercha, método de doble llenado tradicional, método con gutapercha y dientes deciduos.

SLOW REABSORBABLE PASTE

Pasta lentamente reabsorbible



CÓD. 6668
FLOW 20g / FLUIDA

CÓD. 6672
DENSE 20g / DENSA

FLUID - DENSE

MAISTO ENDODONTIC OBTURATION PASTE TYPE.

Based on the original formula of Dr. Maisto with active ingredients as iodoform and camphorated chlorophenol, used for endodontic fillings. The material is absorbed slowly into the periapical area, its antiseptic properties promotes apical closure.

PASTA PARA OBTURACIÓN ENDODÓNTICA TIPO MAISTO - Elaborada en base a la fórmula original del Dr. Maisto con principios activos como el iodoformo y clorofenol alcanforado, utilizado para obturaciones endodónticas. El material se reabsorbe lentamente en la zona periapical, su acción antiséptica favorece el cierre apical.

ENDO-G-FILL



CÓD. 6570
KIT - AVÍO
20g + 10ml

ENDO SEALER

GROSSMAN TYPE - ENDO CEMENT

IMPROVED with micronized process. Root canal sealer. Fills root canal, replaces its content by inert and antiseptic materials, isolating it from the periapical zone. Radiopaque

FÓRMULA TIPO GROSSMAN - CEMENTO ENDO

Mejorada con proceso de micronizado. Sellador de conductos radiculares. Obturación de los conductos radiculares, reemplazando el contenido de los mismos por materiales inertes y antisépticos, aislándolos de la zona periapical. Radiopaco.

MTA ENDO

Reparative cement & endo sealer



CÓD. 6633
REPARATIVE CEMENT
KIT 1g + 3ml

MTA mineral trioxide aggregated cement. Highly biocompatible, non reabsorbible and dimensionally stable material. Bioactive, calcium hydroxide release promoting the tissue differentiation and cell migration, to create new hard tissue and remineralization. Antibacterial and antifungal action. Non mutagenic nor neurotoxic. Promotes forms hydroxiapatite creating a biological seal where applied. Radiopaque, hydrofillic, sets on humid enviroment. Easy to use.

Biocompatible - Bioceramic - Bioactive
Biocompatible - Biocerámico - Bioactivo



Ver caso clínico

CÓD. 6635
ENDO SEALER
KIT 10g + 10ml

Cementos a base de trióxido mineral. Altamente biocompatible, no reabsorbible y estable dimensionalmente. Es bioactivo, liberador de hidróxido de calcio, fomentando la diferenciación y migración de células productoras de tejido duro, estimulando la mineralización. Acción antibacteriana y antifúngica. No mutagénico ni neurotóxico. Formador de hidroxiapatita proporcionando un sellado biológico a la dentina. Es radiopaco, hidrófilo, endureciendo en presencia de humedad. Fácil manipulación.

CANAL SEAL APX

SELLADOR ENDODÓNTICO DEL CANAL

Biocompatible - Bioactive
Biocompatible - Bioactivo



CÓD. 6567
1 DOUBLE SYRINGE AUTOMIX + MIXING TIPS
1 JERINGA DOBLE AUTOMIX + PUNTAS MEZCLADORAS

SLOW SETTING Endodontic sealing cement based on calcium hydroxide and polymers for obturation and sealing of root canals with a highly biocompatible formula. Perfect mixing system 1:1 Automix homogeneous and free of bubbles. Great fluidity that adapts to the canal walls and gutta-percha, providing a good seal. Radiopaque. Eugenol free, compatible with cements and restoratives based on composite resins.

FRAGUADO LENTO Cemento sellador endodóntico a base de hidróxido de calcio y polímeros para obturación y sellado de canales radiculares de fórmula altamente biocompatible. Sistema de mezclado perfecto 1:1 Automix homogéneo y libre de burbujas. Gran fluidez que se adapta a las paredes y al canal gutapercha otorgando un buen sellado. Radiopaco. Libre de Eugenol, compatible con cementos y restauradores a base de resinas compuestas.

RESIN DUO ENDO SEALER

SELLADOR RESIN DUO ENDO

Its great hydrophilic capacity provides a perfect seal and adaptation to the canal walls. Its low shrinkage upon polymerization contributes to a better marginal adaptation. Highly radiopaque facilitating imaging examination. In case of temporary sealing, the product is easy to remove.



CÓD. 6568
1 AUTOMIX SYRINGE 4:1
+ 5 MIXING TIPS 4:1

Su gran capacidad hidrofílica otorga un perfecto sellado y adaptación a las paredes del canal. Su baja contracción al polimerizar colabora con una mejor adaptación marginal. Altamente radiopaco facilitando la examinación por imágenes. En caso de sellado temporal, el producto es fácil de remover.



MTA BIO REPAIR Z

ENDODONTIC REPAIR CEMENT
CEMENTO REPARADOR ENDODÓNTICO



Bioceramic - Bioactive - Biocompatible - with Zirconium
Biocerámico - Bioactivo - Biocompatible - con Zirconio

Indications:

- Treatment of root canal or furcation perforations.
- Retro-obturation in apical surgeries, apexification, and apexogenesis.
- Direct pulp protection.

Attributes:

- Non-resorbable and dimensionally stable.
- Bioactive: Stimulates periapical healing and dentin tissue formation.
- High adhesion to dentin.
- Highly radiopaque, hydrophilic, and sets in the presence of moisture and tissue fluids.

Indicaciones:

- Tratamiento de perforaciones del conducto radicular o furca.
- Retro-obturaciones en cirugías apicales, apexificación y apexogénesis.
- Protección pulpar directa.

Atributos:

- No reabsorbible y estable dimensionalmente.
- Bioactivo: estimula la cicatrización periapical y formación de tejido dentinario.
- Alta adhesión a la dentina.
- Altamente radiopaco, hidrófilo, endureciendo en presencia de humedad y en contacto con líquidos tisulares.

CÓD. 1129

AVIO POWDER 3g + LIQUID 3ml

AVIO POLVO 3g + LÍQUIDO 3ml

MTA BIO REPAIR Z

Endodontic repair cement
Cemento de reparación endodóntico



Bioceramic repair cement highly biocompatible, non-resorbable and dimensionally stable. Bioactive, calcium hydroxide releaser, promoting the differentiation and migration of cells that produce hard tissue, stimulating mineralization. Highly radiopaque, hydrophilic. Does not contain bismuth oxide. Easy handling.

Biocerámico cemento reparador altamente biocompatible, no reabsorbible y estable dimensionalmente. Bioactivo, liberador de hidróxido de calcio, fomentando la diferenciación y migración de células productoras de tejido duro, estimulando la mineralización. Altamente radiopaco, hidrófilo. No contiene óxido de bismuto. Fácil manipulación.

CÓD. 1130

AVIO POWDER 1g + LIQUID 3ml

AVIO POLVO 1g + LÍQUIDO 3ml

MTA BIO SEALER Z WITH ZIRCONIUM



Bioceramic - Bioactive - Biocompatible - with Zirconium
Biocerámico - Bioactivo - Biocompatible - con Zirconio

MTA DENSELL is an endodontic sealing cement composed of a variety of mineral oxides, zirconium oxide and titanium dioxide in small hydrophilic particles for easy mixing and application. It is indicated for sealing endodontically treated root canals, pulp capping, pulpotomies and internal resorption treatment.

MTA DENSELL es un cemento sellador endodóntico compuesto de una variedad de óxidos minerales, óxido de zirconio y dióxido de titanio en pequeñas partículas hidrofílicas para su fácil mezcla y aplicación. Se indica para sellado de conductos radiculares endodónticamente tratados, recubrimiento pulpar, pulpotomías y tratamiento de reabsorción interna.

CÓD. 1132

AVIO POWDER 10g + LIQUID 10ml

(Water soluble Polymer Resin)

AVIO POLVO 10g + LÍQUIDO 10ml

(Resina Polimérica soluble en agua)

CÓD. 1131

SYRINGE 0.5g

JERINGA 0,5g

GLASS IONOMERS

Ionómero vítreo

easydent
dental products



Tip 1

Classic vitreous ionomer for liner / cementation. High resistance and low solubility. Release of fluorine. Easy mixing and low layer thickness. Cements crowns, bridges, posts, inlays and fixation of orthodontic bands.

Ionómero vítreo clásico para cementación / liner. Alta resistencia y baja solubilidad. Liberación de flúor. Fácil mezcla y bajo espesor de capa. Cementa coronas, puentes, postes, inlays y fijación de bandas ortodónticas.

CÓD. 1200

POWDER 10g + LIQUID 8ml

POLVO 10g + LÍQUIDO 8ml



Tip 2

Ionomer for restorations Type III - V Restorative universal deciduous teeth. Fluoride release. Good aesthetics and finish. Easy mixing and application.

Ionómero para restauraciones Tipo III - V Restaurador universal dientes deciduos. Liberación de flúor. Buena estética y acabado. Fácil mezcla y aplicación.

CÓD. 1205

POWDER 10g + LIQUID 8ml

POLVO 10g + LÍQUIDO 8ml



Base

Vitreous ionomer cement based material for cavity base and preparations and as a Liner for bottom coatings of cavity.

Cemento de ionomero de vitreo para la base de cavidad y sus preparaciones, como tambien para el uso como liner para recubrimientos de fondo de cavidad.

CÓD. 1207

POWDER 10g + LIQUID 8ml

POLVO 10g + LÍQUIDO 8ml

IONOMER PHOTO EASYDENT MPLC 2 RESTORATIVE

Ionómero Foto Easydent MPLC 2 Restaurador



CÓD. 1210 - A2

AVIO POWDER 5g

+ 2.5ml LIQUID

AVIO POLVO 5g

+ LÍQUIDO 2.5ml

Photocured restoration ionomer modified with resin.

- Class III-IV-V erosions.
- Very good aesthetics and translucency
- Fluor liberation.
- Sealing of pit and fissures.
- Easy mix and application.
- Triple acid/base cure + peroxide/amina + light cure

CÓD. 1211 - A3

AVIO POWDER 5g

+ 2.5ml LIQUID

AVIO POLVO 5g

+ LÍQUIDO 2.5ml

IONÓMERO DE RESTAURACIÓN FOTOCURADO MODIFICADO CON RESINA.

- Restauraciones CLASE III-IV-V erosiones.
- Muy buena estética y translucencia.
- Liberación de flúor.
- Sellado de fosas y fisuras.
- Fácil mezcla y aplicación.
- Tripe curado ácido/base + Peróxido/Amina + Fotocurado.

GLASS IONOMERS

Ionómero vítreo

CLASSIC IONOMER

Great chemical adhesion enamel/dentin. Great resistance compression. Fluoride release. Easymix formula, facilitates handling. Low solubility. Radio-opaque. Minimum volumetric changes.

IONÓMERO CLÁSICO

Excelente adhesión a esmalte/dentina, excelente resistencia a la compresión. Liberación de flúor. Fórmula easymix, facilita la manipulación. Baja solubilidad. Radiopaco mínimos cambios volumétricos.



CÓD. 1121
TYPE 1 KIT 10 g + 8 ml

Cementation of fixed prosthesis. Cementation of orthodontics. Cementation of posts. Endodontic obturation. High fluidity. Good adhesion. Small particles. Thin layer.

Para la cementación de coronas, puentes, inlay, onlay y postes. Adhesión sin bonding o intermediarios permite una fijación adecuada, nula contracción y bajísima solubilidad en comparación con los cementos tradicionales de fosfato o policarboxilato.



CÓD. 1122
TYPE 2 KIT 10 g + 8 ml

Restorations, Class III, V. Core build up. Re build of Class I and II in Paedodontia.

Restauraciones clase III, V. Reconstrucción de muñones. Reconstrucción de clase I y II en odontopediatría.



CÓD. 1123
BASE KIT 10 g + 8 ml

CAVITY base or liner. Filling. Pit and fissure sealant. Lining. Fast setting

Genera una base insoluble, biocompatible que aísla y recubre el tejido dentinario y permite crear dentina superficial. Genera una base insoluble, biocompatible que aísla y recubre el tejido dentinario evitando la sensibilidad postoperatoria, además permite crear dentina artificial.

GLASS LINER LIGHT CURED



CÓD. 1138
1.5g SYRINGE + 3 CANNULA-TYPE APPLICATORS
JERINGA 1.5g + 3 APLICADORES TIPO CÁNULA

Light cure base material with fluoride release. It surpasses self-curing calcium hydroxide as a pulp protector for having better mechanical properties. **Use:** Fluid material of easy application in cavity base under composite or amalgam restorations. Provides better thermal insulation and protects the pulp from sensitivity to cold / heat. Galvanic pressure and currents in case of amalgams.



Material de base de fotocurado con liberación de flúor. Supera al hidróxido de calcio autocurado como protector pulpar por poseer mejores propiedades mecánicas. **Uso:** Material fluido de fácil aplicación en base de cavidad por debajo de restauraciones de composite o amalgamo. Proporciona una mejor aislación térmica y protege a la pulpa de sensibilidad al frío/calor. Presión y corrientes galvánicas en caso de amalgamas.

TYPE 1 / TYPE 2 / BASE / MOLAR / A.R.T

classic



CÓD. 1124
MOLAR KIT 10 g + 8 ml

Restoration Class I (non occlusion). Specific for subsequent restorations of small cavities without committed occlusion and dentin replacement of high density.

Restauración de clase I sin oclusión. Específico para restauraciones de pequeñas cavidades posteriores, sin compromiso de oclusión y con reemplazo dentinario de alta densidad.



CÓD. 1120
A.R.T KIT 10 g + 8 ml + 8 ml VARNISH

*ATRAUMATIC RESTORATION TREATMENT
Fast setting. Glass Ionomer for minimally INVASIVE technique. Fast setting. Includes a Densell Varnish to COVER the ionomer restoration.*

TÉCNICA DE RESTAURACIÓN ATRAUMÁTICA
Para técnicas de restauración mínimamente invasivas. Fraguado rápido y condensable. El avío incluye barniz protector Densell.



Dentine conditioner for ionomers, made from polyacrylic acid in a 10% solution.

Acondicionador de dentina para ionómeros a base de ácido poliacrílico en solución al 10%.

CÓD. 1118
DENTIN CONDITIONER 8ml
CE



Varnish to COVER ionomers, PREVENTS water loss or gain (fluid balance) that is the most important problem of glass ionomers.

Barniz para cubrir ionómeros evita la pérdida o absorción de agua (equilibrio hídrico) que es el problema más importante de los ionómeros vítreos.

CÓD. 1119
PROTECTIVE VARNISH 8ml
CE

MPLC MODIFIED GLASS IONOMER

LightCure Glass Ionomer / Ionómero vítreo fotopolimerizable

resin reinforced

Reforzado con resina



CÓD. 1114
MPLC1 KIT 10 g + 6 ml

CÓD. 1116
MPLC1 KIT 5 g + 3 ml

MPLC 1 - LINER + CEMENTATION

Glass ionomer cement. Indicated for cementing to rigid restorations, base CAVITIES and liner. INDICATIONS: in patients at high risk of caries in elderly or less mobile patients. TWO FUNCTIONS IN ONE: Cement + liner.

MPLC 1 - CEMENTO + LINER

Ionómero de vidrio para cementación. Indicado para cementación de restauraciones rígidas, liner y base de cavidades. **INDICACIONES:** en pacientes con alto riesgo de caries, en pacientes ancianos ó con poca motricidad. **DOS FUNCIONES EN UNO:** Cemento + liner.



CÓD. 1115
MPLC2 KIT 10 g + 6 ml
SHADE A2, A3, A3.5 RADIOPAC

CÓD. 1117
MPLC2 KIT 5 g + 3 ml
A2, A3

MPLC 2 - RESTORATIVE + CORE

Restorations allows greater chemical stability. Is the ideal material to restore abrasions and erosions, when there is little loss of tooth structure and no high aesthetic demands. Excellent finishing and polishing. TWO FUNCTIONS IN ONE: RESTORATIVE + core.

MPLC 2 - RESTAURADOR + MUÑÓN

Permite realizar restauraciones con mayor estabilidad química. Es el material ideal para restaurar abrasiones y erosiones, cuando existe poca pérdida de tejido dentario y no hay demanda de alta estética. Excelente terminación y pulido final **DOS FUNCIONES EN UNO:** Restaurador + muñón.

ZINC PHOSPHATE CEMENT

Cemento fosfato de zinc



CÓD. 1100
KIT 30 g+15 ml

Cement with high ADHESIVE strength, resistance to compression. Cementation of crowns, bridges and inlays. Easy to manipulate.

Cemento de gran poder adhesivo, resistente a la compresión. Cementación de coronas, puentes e incrustaciones. De fácil manipulación.

ÓXIDO DE ZINC



Calidad Farmacopea Máxima pureza. Tiempo de fraguado normal.

ÓXIDO DE ZINC POLVO

6650-50 Pot x 50g

6650-100 Pot x 100g

6650-250 Pot x 250g

OXIDO DE ZINC CON ENDURECEDOR

6650-65 Pot x 65g

ZOER

Zinc oxide-eugenol resin reinforced cement



CÓD. 1104
KIT 40 g+15 ml

Intermediary restorative material. Zinc oxide and eugenol cement reinforced with resin, for intermediate restorations. Useful as a base for pulp protection. Temporary fix of crowns and bridges.

Cemento de óxido de zinc y eugenol reforzado con resina para restauración intermedia.

BRACKET BOND ONE



CÓD. 1160 SYRINGE 3g + GEL ETCH 3g
JERINGA 3g + GEL ÁCIDO 3g

CÓD. 1161 SYRINGE 3g + GEL ETCH 3g + PRIMER 2g
JERINGA 3g + GEL ÁCIDO + PRIMER 2g

Adhesive for light curing brackets and high level of adhesion due to its primer.

Adhesivo para brackets de fotocurado y alto nivel de adhesión por poseer primer.

CALCIUM HYDROXIDE LC

Liner



CÓD. 1137
SYRINGE 1.5g + 3 APPLICATORS
JERINGA 1.5g + 3 APLICADORES

Radiopaque light-curing material based on calcium hydroxide for indirect coating and protection of the pulp. It can be used as a liner under any filling material. Easy to apply.

Material de fotocurado radiopaco a base de hidróxido de calcio para recubrimiento indirecto y protección de la pulpa. Puede utilizarse como liner bajo cualquier material de obturación. Fácil de aplicar.

CALCIUM HYDROXIDE

Self cure - fraguable



CÓD. 1136
BASE 13g + CATALYST 11g

PROTECTIVE barrier between dentin and pulp, and between acid RESTORATIVE materials and cement. Radiopaque paste for lining and pulp capping.

Barrera protectora entre la dentina y la pulpa y los cementos y materiales restauradores ácidos. Compuesto radiopaco para base y recubrimiento pulpa.

TEMPORARY CEMENT

NE no eugenol - sin eugenol



CE

CÓD. 1150
BASE 25g + CATALYST 25g

LEAVES NO RESIDUE

NO DEJA RESIDUOS

Paste to paste eugenol free temporary cement. Ideal for temporary crowns and bridges. As it doesn't contain eugenol, is ideal as a step prior to final cementation with resin cements, composites or resin-modified glass ionomer.

Cemento temporario pasta-pasta sin eugenol. Indicado para cementar prótesis provisoriamente. No altera la adhesión con cementos resinosos, resinas compuestas o ionómeros vítreos modificados con resina.

BISACRYL C+B RESIN

Resina Bisacryl C+B



CÓD. 1168 • A1
CÓD. 1169 • A2
DOUBLE 7.5g / 5ml SYRINGE + 5 TIPS
JERINGA DOBLE 7,5g / 5ml + 5 PUNTAS

CÓD. 1171 • A1
CÓD. 1172 • A2
DOUBLE CARTRIDGE 75g / 50ml + 5 TIPS
CARTUCHO DOBLE 75g / 50ml + 5 PUNTAS
1:1 RATIO

CE

Castable material for temporary self-healing crowns and bridges Offers excellent aesthetic and mechanical properties for crown construction and long-lasting temporary bridges. It has a low exothermic polymerization process.

Densell®

easydent



CÓD. 1165 • A1
CÓD. 1166 • A2
10ml AUTOMIX SYRINGE + 5 TIPS
JERINGA AUTOMIX 10ml + 5 PUNTAS
4:1 RATIO

Material moldeable para Coronas y Puentes temporarios de autocurado. Ofrece excelentes propiedades estéticas y mecánicas para la construcción de coronas y puentes temporario de larga duración. Posee un proceso de polimerización de baja exotermia.

ACRÍLICO CAULK

Temporary Resin C+B Fast

CÓD. 1365 • A2 - A3
Polvo 40g

CÓD. 1366
Líquido 40ml

For Temporary Crowns & Bridges

- Self-curing with color stability
- Dimensional integrity and aesthetics
- Superior flexural strength
- High tensile strength

Líquido para coronas y puentes temporarios

- Autocurado con estabilidad de color
- Integridad dimensional y estética
- Resistencia superior flexural
- Resistencia superior a la tensión

RESIN DUO CEMENT



CE

Dual-curing cement with ultra-fine particles for inlays, onlays and porcelain crowns or composite. UNIVERSAL translucent shade making it suitable to be use with a wide range of dental colors. High filler content that offers high strength and low solubility. Resistant to erosion and pigmentation. Resin-based cement for fixing of crowns, bridges and inlays.

CÓD. 1155
BASE 4g + CATALYST 4g

RESIN DUO CORE CEMENT



CÓD. 1157
CEMENT RESIN DUO CORE AUTOMIX 8g

Resin based cement for fixation of crowns, bridges and inlays and core conformation. Cem+core dual, auto and photo curing system.

Cemento a base de resina para fijación de coronas, puentes e incrustaciones y conformación de núcleo/muñón. Cem+core sistema de curado dual, auto y foto.

RESIN DUO TEMPORARY CEMENT

Cemento Temporario a Base de Resina



CÓD. 1152
7.8g SYRINGE RELATIONSHIP 4:1 + 5 MIXING TIPS
JERINGA 7.8g RELACIÓN 4:1 + 5 PUNTAS MEZCLADORAS

It is the ideal solution for crowns and long-term temporary bridges, made with resin bycryn resin C+B.

- Aesthetic for its good translucency.
- Good marginal seal by minimal controlled expansion 1.7%.
- Dual cure, self cure and light cure.
- Offers perfect and bubble free mixtures.

- Perfect and comfortable fit for the patient
- Easy to remove, the cement adheres to the crown.
- Easy, fast and direct application.

RESIN DUO SE CEMENT WITH MDP



CÓD. 1154
SYRINGE 8g + MIXING TIPS (UNIVERSAL COLOR)
JERINGA 8g + PUNTAS MEZCLADORAS - COLOR UNIVERSAL

Self-etching, self-adhesive, dual-cure resin-based cement with fluoride release for the cementation of crowns, bridges, inlays, and onlays.

- High color stability and natural fluorescence for an excellent aesthetic result, and it is moisture-tolerant.
- Bonds to enamel, dentin, zirconia, metal, ceramic, titanium, and composite-ideal for crowns, bridges, veneers, posts, inlays, and onlays.
- No etching, priming, or bonding required.

Mixing ratio 1:1 easy to mix
Relación de mezcla 1:1 fácil de mezclar

MIXING TIPS

Puntas



CÓD. 1190
For dual syringe
Brown Mixtip #10A x50
39.5mm 1:1
PARA JERINGA DUAL



CÓD. 1192
For dual syringe
Brown Mixtip #11 x50
32.6mm 1:1
PARA JERINGA DUAL



CÓD. 1194
For dual syringe
BROWN + ORANGE
MIXTIP #13B x50
39mm 10:1 4:1 Ratio



CÓD. 1193
For brown mixing tip
Puntas Apply Tip N8 x100
PARA BROWN MIXING
TIP (CÓD. 1192)

TEMPORARY FILLING MATERIAL

Material de obturación temporario



RADIOPACO
CÓD. 1139
40g



CE

Paste for temporary obturations with excellent marginal seal. Indicated for Classes I, II, III and V CAVITIES, and for endodontic treatment.

Se adhiere a la cavidad asegurando un perfecto sellado marginal. Fácil de retirar. Indicado para cavidades de tipo I, II, III y V; y para tratamiento endodóntico.



CÓD. 1145
TEMPORARY FILLING MATERIAL
RESTAURADOR TEMPORARIO
AUTO 40g

easydent
dental products

Creamy consistency, easy to apply temporary restorative material.

Material de restauración temporaria de fácil aplicación de consistencia cremosa.

LIGHT CURED TEMPORARY FILLING MATERIAL

Densell®



CÓD. 1141
3g

CE

Temporary restorative for inlay-onlay-implants. USE: Its elastic and transparent consistency makes it suitable for: • Temporary restorations • Creation of provisional pieces of inlay preparations. • Readjust precast polycarbonate crowns. • Temporalize more extensive or less retentive preparations such as onlays. • Cover implant screw channels • Flexible and transparent, easy to put on and take off in one piece.

Restaurador temporario para inlay-onlay-implantes. USO: Su consistencia elástica y transparente lo hace adecuado para: • Restauraciones temporarias • Creación de piezas provisionales de preparaciones inlay • Reajustar coronas de policarbonato prefabricadas. • Temporalizar preparaciones más extensas o menos retentivas como onlays. • Obturar canales de tornillos para implantes • Flexible y transparente, fácil de colocar y de retirar en una sola pieza.

SEALANT P&F



CÓD. 1601
PHOTO TRANSPARENT 5g
WITHOUT FLUORIDE
SIN FLUORURO



1603 Photo Fluor white 5g bottle
1605 Photo Fluor white 1.5g syringe

WITH FLUORIDE white
CON FLUORURO blanco



Pit and fissure sealant based on BIS-GMA. Useful as a PREVENTIVE barrier for caries.

Sellador de puntos y fisuras basado en resina BIS-GMA. Prevención de caries en puntos y fisuras.

TOPICAL FLUORIDE GEL

Gel de fluoruro tópico

ACIDULATED

1 minute. For topical application.
Thixotropic properties. 200 ml.

ACIDULADO

1 minuto. Acidulado para aplicación tópica. Tixotrópico.
200 ml.



- 6610-B** Banana
- 6610-F** Frutilla / Strawberry
- 6610-M** Manzana / Apple
- 6610-T** Tutti-Frutti
- 6610-U** Uva / grape

NEUTRAL

1 minute. Thixotropic properties. For topical application. Indicated for adult patients and post-whitening. No pigment on tooth restorations. 200 ml.

NEUTRO

Gel de fluoruro pH neutro. Acción 1 minuto. Tixotrópico. Indicado para post blanqueamiento dental. No pigmenta las restauraciones ni los dientes sabor menta. 200 ml.

- 6611** Menta / Mint

KIDS

Fluoride gel, neutral pH
With xylitol. 200 ml. 1 minute.

NIÑOS

Gel de fluoruro pH neutro
Con xilitol. 200 ml. 1 minuto.

- 6611-C** Chocolate
- 6611-D** Milk Caramel
Dulce de leche
- 6611-F** Strawberry, Cream
Frutilla con crema

BUCKETS - CUBETAS

Plastics for fluoride - Plásticas para flúor



- 581** Small x 100
- 582** Medium x 100
- 583** Big x 100
- 585** Double small x 50
- 586** Double medium x 50
- 587** Double large x 50

FLUORIDE VARNISH

Barniz con fluoruro

Sodium fluoride VARNISH for PREVENTION, control and NON INVASIVE treatment of incipient carious lesions. Is indicated in the dental caries prophylaxis and in the treatment of dental hypersensitivity. Acts on dental exposure surfaces with a high power desensitizer, filling dental canals.

Barniz con fluoruro de sodio para la prevención, tratamiento no invasivo de lesiones de caries incipientes. Indicado en la profilaxis de la caries dental y el tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria. Actúa sobre las superficies dentinarias expuestas con un gran poder desensibilizante obturando los conductillos dentinarios.



CÓD. 6604
FLUOR VARNISH XT 10 ml GEL
CE



CÓD. 6606
FLUOR VARNISH XT 3g
CE



CÓD. 6607
FLUOR VARNISH 5 ml
CE

CÓD. 6607-05
FLUOR VARNISH XT GEL
Monodosis 0.5ml



CÓD. 6608
FLUOR VARNISH AQUA 5ml
CE

FLUORIDE VARNISH. Indicated to treat dentin hypersensitivity. Ideal for post-whitening treatment. Quick and lasting effect.

BARNIZ FLUORADO. Indicado para tratar la hipersensibilidad dentinaria. Ideal para post tratamiento de blanqueamiento dental. Efecto rápido y duradero.

FLUORSILVER

Cariostatic

CARIOSTATIC BACTERICIDAL dental remineralization. With Fluoride SILVER diamine that is precipitated OVER the surface, promote the formation of the hydroxyapatite.

CARIOSTÁTICO. Remineralizador dental. El fluoruro diamino de plata precipita sobre la superficie dentinaria promoviendo la formación de hidroxiapatita.



CÓD. 6550
5ml



PROPHY PASTE

Pasta profiláctica



CE

Professional use, especially suitable for removing surface stains.

Uso profesional, indicada especialmente para la eliminación de manchas superficiales.

TUBE - POMO 100g

CE

6658 Without fluoride mint - sin flúor

6658-T Without fluoride tutti frutti - sin flúor

6659 With fluoride mint - con flúor

6659-T With fluoride tutti frutti - con flúor

WITHOUT FLUORIDE / SIN FLUORURO

WITH FLUORIDE / CON FLUORURO

6665-M JAR - POTE mint (200g)

6665-T JAR - POTE tutti frutti (200g)

6667-M JAR - POTE mint (200g)

6667-T JAR - POTE tutti frutti (200g)

PLAQUE DETECTOR

Detector de placa bacteriana

Two tone plaque detector, it works on old and new plaque differentiating color.

Detector de placa dos tonos. Actúa sobre placa vieja y nueva diferenciándolas por color.



CE



CE

CÓD. 6589

RED 20 ml

ROJO

CÓD. 6590

YELLOW 20 ml

AMARILLO

CÓD. 6591

TWO TONE 15 ml

CARIES DETECTOR

Detector de caries



Red Rojo

Detects caries which are difficult to reach, by staining them with color.

Detector colorimétrico de caries.

Detecta la dentina infectada.

CÓD. 6600

SOLUTION - BOTTLE 5 ml / SOLUCIÓN EN FRASCO 5 ml

GENERICS



6510 Trichloroacetic Acid
Ácido Tricloroacético 20 ml

6572 Canphorated Chlorophenol
Clorofenol alcanforado 20ml

6575-10 Eugenol Pure 10 ml

6575 Eugenol Pure 20 ml

6575-30 Eugenol Pure 30 ml

6605-10 Formocresol 10 ml

6605-15 Formocresol 15 ml

6605 Formocresol 20 ml

6616 Calcium Hidroxide 20g + 20ml

6616-P Calcium Hidroxide Pure 20 g

6616-P45 Calcium Hidroxide Pure 45 g

6617 Sodium Hypochlorite 100 ml

6620 Iodoform 10 g

6660 Canphorated Paramonochlorophenol
Paramonoclorofenol alcanforado 10ml

6690 Xylol Pure 20 ml

HEMOSTATIC



Astringent material for hemostasis and cervical fluid control based on 20% ferric sulfate. Thixotropic. Facilitates impression taking. Easy application. It can also be used in cementation procedures as it inhibits cervical fluid.

6612 GEL Jeringa 1.2ml Sulfato Ferrico Sin Epinefrina

6613 Solución 10ml Sulfato Ferrico astringente Sin Epinefrina

6614 GEL Jeringa 1.2ml cloruro de aluminio

6615 Solución 10ml cloruro aluminio

Astringente a base de sulfato férrico al 20%. Tixotrópico. Para hemostasis y control del fluido crevicular. Facilita la toma de impresiones.

También puede ser utilizado en los procedimientos del cementado ya que inhibe el fluido crevicular. Fácil aplicación.

WHITE DAM

Barrera gingival



CÓD. 6548

SYRINGE / JERINGA 1.2 ml + 2 TIPS

LIGHT CURED GINGIVAL BARRIER

Polymer based barrier to coat the GINGIVAL tissue before whitening. Quick implementation and easy to REMOVE. Polymerized with lamp. Use as a spacer block-out resin.

BARRERA GINGIVAL DE FOTOCURADO

Barrera a base de polímero para recubrir el tejido gingival previo al blanqueamiento. Rápida aplicación y fácil remoción. Polimeriza con luz. Uso como resina espaciadora block-out.

ENDO PREP



CÓD. 6571

SYRINGE 3g + 3 CÁNULAS XF + INSTRUCTIVE

Material to facilitate chemical-mechanical treatment of ducts. It has EDTA-C as a chemical duct stretcher as well as lubricating and bleaching the duct for a better mechanical / manual treatment

Material para facilitar el tratamiento químico-mecánico de conductos. Posee EDTA-C como ensanchador químico del conducto además de lubricar y blanquear el conducto para un mejor tratamiento mecánico/manual.

DESENSITIZER K+F



CÓD. 6587

GEL 1.2 ml

Potassium and fluoride topic solution or gel. Colourless. Eliminates and reduces SENSITIVITY in teeth. Indicated for preand post-whitening.

A base de nitrato de potasio y fluoruro de sodio. Incoloro. Elimina y reduce la sensibilidad dentinaria. Ideal para pre y post- blanqueamiento.

LUSTRE



CÓD. 6669

SYRINGE / JERINGA 2.5 ml

Micro ABRASIVE paste to eliminate superficial calcium or flouride pigment on the enamel, (smaller than 0.2mm), and decalcification defects. Proper for pre and post whitening treatment. For MICRO-ABRASIVE technique.

Pasta microabrasiva quitamanchas para blanqueamiento. Ideal para pre y post-blanqueamiento. Elimina pigmentos superficiales del esmalte. Indicado para técnica de microabrasión.

DENSELL WHITE®

Endo - Perborate



Endogenous whitening for endodontically treated teeth. Perborate based.

Blanqueador interno, para dientes endodónticamente tratados. Basado en perboratos.

CÓD. 6544

ENDO-PERBORATE KIT

6 bottles of powder x1g + 1 x 15ml liquid + accessories
6 frascos de polvo x1g + 1 líquido x 15ml + accesorios

Endo - Peroxide



Endogenous whitening for endodontically treated teeth. Based on carbamide peroxide.

Blanqueador interno, para dientes endodónticamente tratados a base de peróxido de carbamida.


CÓD. 6542

ENDO - PEROXIDE KIT

Powder 5g + lliquid 5ml + accesories
Polvo 5g + líquido 5ml + accesorios

DENSELL WHITE® CP 16%

Carbamide Peroxide

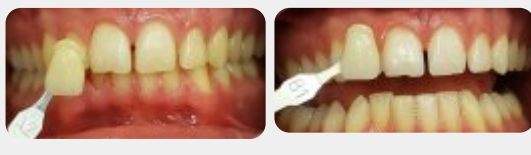

ambulatorio



CÓD. 6530
FULL KIT HOME

4 syringes CP16%+ tips
+ 2 desensitizer K+F
+ accesories
+ 2 dental plates

4 jeringas CP16%
+ puntas aplicadoras
+ 2 desensibilizante K+F
+ accesorios
+ 2 placas



CÓD. 6531
SYRINGE / JERINGA CP16 - 2ml

CÓD. 6533
SYRINGE / JERINGA CP22 - 2ml

Treatment by night 6/8 hours; 1 week. By day 3 hours for 2 weeks. Carbamide peroxide.

Tratamiento nocturno 6/8 horas 1 semana, diurno 3 horas durante 2 semanas. Peróxido de carbamida.

DENSELL WHITE® CP 22%

Carbamide Peroxide



CÓD. 6532
FULL KIT HOME

4 syringes CP22%+ tips
+ 2 desensitizer K+F
+ accesories.

4 jeringas CP22%
+ puntas aplicadoras
+ 2 desensibilizante K+F
+ accesorios.



CÓD. 6534
KIT BLANQUEAMIENTO DENSELL WHITE LIGHT LED CP22%
KIT WITH LED LIGHT / KIT CON LUZ LED + CUBETA

DENSELL WHITE® CP 35%

Carbamide Peroxide

office



CÓD. 6535
FULL KIT OFFICE

Kit 4 syringes x 2 ml
+ 1 desensitizer K+F
+ 1 white gingival dam
+ accesories.

Kit 4 jeringas x 2 ml
+ 1 desensibilizantes K+F
+ 1 Barrera gingival
+ accesorios.

CÓD. 6536
SYRINGE / JERINGA CP35 - 2ml

DENSELL WHITE® HP 35%

Hydrogen Peroxide

CÓD. 6539
TWO PATIENT KIT OFFICE

8 Arches, 4 Pots of powder 0.5g each, 2 liquid droppers, 2 Densell white dam gingival barrier, 2 K+F desensitizing syringes, accesories.

8 Arcadas, 4 Potes de polvo 0.5g c/u, 2 Goteros líquidos, 2 Jeringas barrera gingival densell white dam, 2 Jeringas desensibilizante K+F, accesorios.



CÓD. 6540
ONE PATIENT KIT OFFICE

4 Arches 2 Pots of powder 0.5g each, 1 liquid dropper 5ml, 1 Densell white dam gingival barrier, 1 K+F desensitizing syringe, accesories.

4 Arcadas, 2 Potes de polvo 0.5g c/u, 1 Gotero líquido, 1 Jeringa barrera gingival densell white dam, 1 Jeringa desensibilizante K+F, accesorios.




CÓD. 8797
WHITENING LIGHT
PERSONAL • PORTABLE

LUZ BLANQUEAMIENTO
PERSONAL • PORTÁTIL

easydent
dental products

C+SILICONE

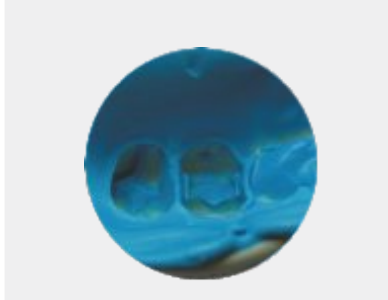

condensation
condensación

- 1082** Universal activator 35 g
- 1084** Light 120 g
- 1086** Putty 1000 g

A+SILICONE

cartucho

addition
adición



1090 CE
Light
50ml



1096 CE
Bite A85
50ml



32749
Silicone separator
Separador de silicona
10ml



1091 CE
Regular
50ml



1097 CE
Bite A95
50ml

32746
Gingival A40 Soft
Easydent. 50ml.



32750 CE
Cristal A70
Densell. 50ml

32752
Cristal A72
Easydent. 50ml

32747
Gingival A70 Flex
Densell. 50ml.

1070
Dispenser
Easydent
50 ml

32748 CE
Gingival A40 Soft
Densell. 50ml

Tubes base + catalyst



1092
Light 120g tubes

1093
Regular 120g tubes



1095 Putty Soft 800 g
Base 400g+catalyst 400g
Base 400g+catalizador 400g

Addition silicone. Affinity to wet surfaces. Excellent flowability under pressure for IMPROVED detail reproduction. Perfect impressions without bubbles or distortions. Can be used with a UNIVERSAL dispenser.

Silicona por adición. Afinidad a la superficies húmedas. Excelente fluidez bajo presión para una mejor reproducción de detalles. Impresiones perfectas sin burbujas ni distorsiones. Puede utilizarse con un dispenser universal.

Mixing tips / Puntas



1073
MIXING TIPS PINK x50 - #4
Regular/bite/cristal/gingival



1078
APPLY TIP N1 YELLOW x100
Para puntas yellow-light



1194
FOR DUAL SYRINGE
BROWN + ORANGE MIXTIP #13B X50
39mm 10:1 4:1 Ratio



1195
BLUE MIX x50 - #1
1:1 para cartucho 50ml



1074
MIXING TIPS GREY x50 #3
Bite/gingival/cristal/temp



1079
APPLY TIP N2 WHITE x100
Para puntas Rosa/Verde
regular/bite/gingival/cristal



6320
JERINGA PARA IMPRESIÓN
Punta flex - polipropileno

1196
ORANGE MIX x50 #6
10:1 4:1 para cartucho 50ml

DENSELL MEDICAL

Disinfectants and cleaners / desinfectantes y limpiadores



CÓD. 6860
BACTER
500ml

DISINFECTANT CLEANSER

For general cleaning and surface disinfection or ultrasonic cleaner Disinfection of suction equipment. Disinfection of instruments by dipping in cleansing solution. Suitable for metals and plastic.

DESINFECTANTE LIMPIADOR

Limpieza y desinfección de superficies o lavado por ultrasonido. Desinfección de sistemas de aspiración. Desinfección de instrumentos por inmersión. Apto para metales y plásticos.



CÓD. 6875
BACTER-BUR
500ml

DISINFECTANT CLEANSER OF DENTAL BURS

Disinfects by immersion or ultrasound. Wide spectrum disinfectant and cleans by immersion.

DESINFECTANTE LIMPIADOR DE FRESAS

Para utilizar por inmersión o por ultrasonido. Acción desinfectante de amplio espectro. Acción de limpieza.



Biodegradable

CÓD. 6880
BACTER-Z
1000ml

ENZYMATICAL NON-IONIC CLEANSER

Enzyme non-ionic bacteriostatic detergent. Easy rinse. Soluble in hard water. REMOVES organic material. Tri Enzimatic.

LIMPIADOR ENZIMÁTICO NOIÓNICO

Detergente enzimático neutro bacteriostático. De fácil enjuague soluble en aguas duras. REMUEVE material orgánico. Trienzimático.

LABORATORY

Gypsum & acrylic separator / Separador para Yeso y Acrílico



CÓD. 34240
1l

CE

It is applied as a separator and release agent for acrylic prostheses: When applied to the plaster or denture mold, it seals the pores and forms a smooth surface layer that provides excellent separation of the denture from the mold.

Se aplica como separador y desmoldante para prótesis de acrílico: Al aplicarse sobre el molde de yeso o dentadura sella los poros y forma una capa de superficie suave que otorga una excelente separación de la dentadura del molde.

SILICONE LABOR

Silicona para laboratorio



- | | |
|--|--|
| 32743 Labor A85 1kg - Rígida | 32748 Silicona A+ GINGIVAL A40 Soft cartridge x 50ml + tips |
| 32745 Labor A95 1kg - Extra rígida4 | 32750 Silicona A+ CRISTAL cartridge x 50ml + tips |
| 32746 Silicona A+ GINGIVAL A40 Soft cartridge x 50ml + tips | 32752 Silicona A+ CRISTAL A72 cartridge x 50ml + tips |
| 32747 Silicona A+ GINGIVAL A70 Flex cartridge x 50ml + tips | |

For the dental laboratory, directed extra oral use only, comprising crosslinkable by condensation polysiloxanes. Perfect compatibility with self-curing acrylic resins. High precision in the details. Absence of deformation. High COMPRESSIVE strength and RECOVERY from deformation. To make fronts for fixed and REMOVABLE prosthesis. Repair appliances and keys for temporaries.

Para el laboratorio de prótesis dental dirigido exclusivamente a uso extra oral, compuesto de polisiloxanos. Reticulable por condensación. Perfecta compatibilidad con las resinas acrílicas autopolimerizables. Elevada precisión en los detalles. Ausencia de deformación. Resistencia elevada a la compresión y al extraerlo. Para confeccionar frentes para prótesis fija y removible. Composturas de aparatos y llaves para provisionales. Dureza shore 95.

DURALINE FAST PATTERN RESIN



EXTRA-FINE ACRYLIC RESIN. Self curing and fast setting. Use to make patterns of posts and inlays with an easy technique. Replaces wax and neither deforms nor contracts. Great dimensional stability and rigidity. Precision in the reproduction of details.

ACRÍLICO EXTRAFINO para la confección de patrones de colado. Tiempo de polimerización regulable. Reemplaza a la cera, no se deforma ni contrae. Obtenga colados de ajuste superior. Gran estabilidad dimensional y rigidez. Precisión en la reproducción de detalles.

CÓD. 1391
KIT 20 g + 20 ml

MANDREL

Mandril



CÓD. 31670
PM TO FG CONVERTER
CONVERTIDOR PM A FG
2.35 x 1.6mm

CÓD. 31671
PM SPIRAL
CILÍNDRICO PARA GOMA PUNTA
12mm 2.35x45mm

CÓD. 31672
PM SPIRAL
CÓNICO PARA FIELTROS
12mm 2.35x45mm

COD 31673
PM REINFORCED x1
PM REFORZADO x1
ACERO NIQUEL

COD 31675
PM FOR 8MM HEAD DIAMETER DISCS
PARA DISCOS 8mm DIÁMETRO CABEZA

DENTUFLEX RELINER



CÓD. 1355

FLEXIBLE RELINER

DENTUFLEX REBASADO LARGA DURACION PINK

40 ml + 40 g + accessories

Durable denture reline self cure

Long lasting flexible reliner. Plasticized to remain resilient in the patient's mouth or 9-12 months. Pink color.

Rebasador resiliente de autocurado para tejidos blandos larga duración. Para prótesis completas y parciales removibles. Ofrece confort al paciente en los tratamientos protéticos. 9-12 meses.



CÓD. 1358

HARD RELINER

DENTUFLEX REBASADO DENTINO

40 ml + 40 g + accessories

Dentuflex Hard is a long lasting self curing denture relining resin. It is a combination of long chain acrylic polymers and monomers that set hard and strong. Therefore, the relines not porous and will not readily gel stained. The application technique is simple and safe. Ideal consistency to obtain a long lasting reline that can be applied to REMOVABLE partial and total acrylic dentures. Pink color. Self cures and does not require heat or pressurization. Simple technology with consistent results.

Rebasador definitivo de prótesis removibles. Ajuste perfecto y definitivo de la prótesis en boca. Color rosa. Autocurado en frío con fórmula de activadores especiales, no requiere calor o presurizadora. Técnica simple con resultados consistentes. Buena adhesión a la prótesis. Puede ser aplicado a las prótesis parciales removibles acrílicas y total.

Dentusoft (pink/clear/bacter)	Cushion treatment / Acondicionador de tejidos	3 months / 3 meses
Dentuflex one	Cushion treatment - Reline / Acondicionador - Rebasador	6 months - meses
Dentuflex / dentuflex hard	Denture reline / Rebasador	9-12 months - meses / final - definitiva

DENTUFLEX SEAL

Brilliant glaze sealer / Barniz sellador brillante



Self curing sealer VARNISH for application on all acrylic reliners surfaces. The only formula that polymerizes in the presence of oxygen. Seals all imperfections on the surface, GIVING immediate shine. Maintains good hygiene. IMPROVES the color stability of the prosthesis. Get painted and dried in 1 minute. Produces a hard and aesthetic surface without polishing.

De autocurado para aplicar sobre todas las superficies acrílicas de rebasado. Fórmula única que polimeriza en presencia de oxígeno. Sella todas las porosidades de la superficie dando brillo inmediato. Protege y da brillo a los rebasados resilientes y definitivos. Mejora la estabilidad de color de las prótesis. Se pinta y seca en minutos con chorro de aire.

CÓD. 1351

5 ml

DENTUSOFT

SOFT CUSHION RELINER



CÓD. 1352
DENTUSOFT BACTER + 40 g + ACCESORIES
SOFT CUSHION

DENTUSOFT BACTER
 WITH CLORHEXIDINE ANTISEPTIC ACTION.
 Combines the properties of tissue conditioning of Dentusoft with a long lasting antibacterial to IMPROVE the healing process. Ideal for treatments of implants. Pink 40ml.

CON CLORHEXIDINA ACCIÓN ANTISÉPTICA.
 Material acondicionador resiliente con propiedades antisépticas. Mejora los procesos de cicatrización. Ideal para tratamientos de implantes. Color rosa 40ml.




CÓD. 1353
DENTUSOFT CLEAR / TRANSLÚCIDO
40 ml + 40 g + ACCESORIES
SOFT CUSHION



CÓD. 1354
DENTUSOFT PINK RELINER
40 ml + 40 g + ACCESORIES
SOFT CUSHION

DENTUSOFT
 A short-term, very soft reline for temporary cushion treatment. For complete and REMOVABLE partial dentures. Facilitates patient adaptation to the prosthesis. Lasts 3 months.

Acondicionador temporario para tejidos blandos. Para prótesis completas y parciales removibles. Facilita la adaptación del paciente a la prótesis. Permanece resiliente durante 3 meses.

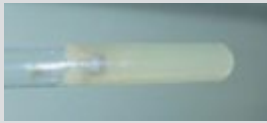

Culture of Candida Albicans in other reline treatment. POSITIVE.

Cultivo de Candida Albicans en otros rebasadores. Resultado positivo.



CULTIVATION of Candida albicans in Dentusoft Bacter reline. NEGATIVE.

CULTIVO de candida albicans en Dentusoft Bacter. Resultado NEGATIVO.

DENSELL SEAL GLOSS

Densell Brillo sellador



Gloss sealer, self cure for acrylics and relines. GIVES instant shine without polishing. SOLVE the porosities of self-curing acrylics. PROVIDES greater color stability.

Brillo sellador de autocurado para acrílicos y rebasados. Da brillo instantáneo sin pulido. Soluciona las porosidades de los acrílicos de autocurado. Brinda mayor estabilidad de color.

CÓD. 36000
 20 ml

PREMIUM HI-IMPACT 45



Heat-cured acrylic resin with an enhanced methyl methacrylate formula, designed to resist cracks and fractures under pressure. Available in fibred pink.

Resina acrílica de termocurado con fórmula mejorada de metacrilato de metilo resiste agrietaduras y fracturas bajo presión. Color rosa fibrado.

CÓD. 36060
 AVÍO TERMO 23g + 11ml

ARTICULATOR

Articulador

easydent
dental products

CÓD. 31005

4100 ARTICULATOR WITH FACIAL ARCH


ARTICULADOR 4100 CON ARCO FACIAL



Incluye estuche portátil



- Flat condylar guide.
- Adjustable bennet angle.
- Adjustable intercondylar distance.
- Does not lock in centric.
- Central spring stabilizer system.

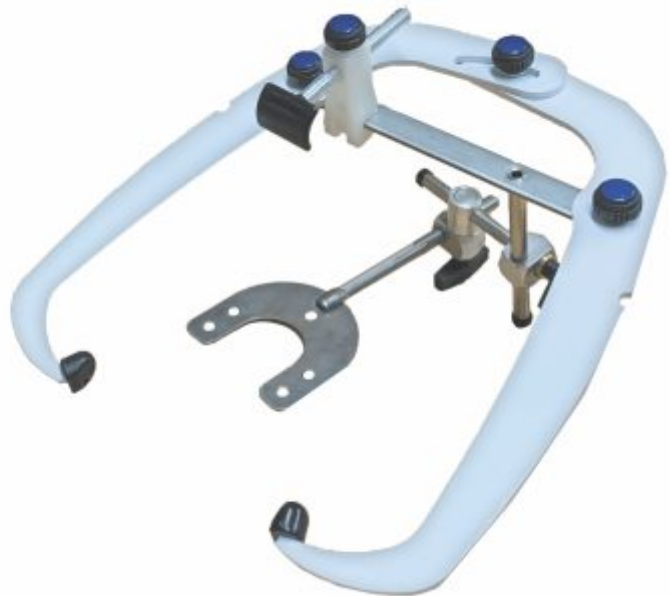

- Guía condilar plana.
- Ángulo de bennet ajustable.
- Distancia intercondilar ajustable.
- No trava en céntrica.
- Sistema estabilizador de muelle central.



CÓD. 31007

PLATE FOR ARTICULATOR WITH METALLIC CENTER

PLATINA PARA ARTICULADOR CON CENTRO METÁLICO



Dental Medrano
WORLD CLASS DENTAL SOLUTIONS

GET THE PRODUCTS HERE

