

# KENDA®

DENTAL POLISHERS



BROCHURE DE PRODUCTOS


ARGENTINA



## PULIDORES PARA COMPOSITOS Y CERÁMICAS

### NOBILIS


SISTEMA DIAMANTADO DE PULIDO EN 1 PASO

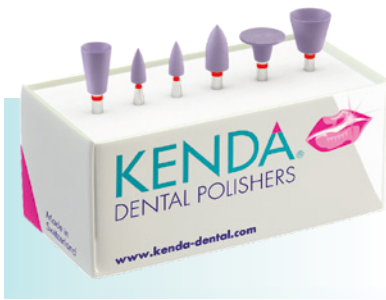

- Pulidores de diamante aglutinado en silicona flexible para uso en restauraciones dentales.
- Uso como pulidor general en restauraciones de composites y cerámicas.
- Suaviza y da brillo sedoso a las superficies. Ideal para posteriores.
- COD: 021820 Kit surtido con 6 pulidores
- COD: 021825/28/29 Repuesto con 5 pulidores (copa o punta o disco)

### UNICUS


SISTEMA DIAMANTADO DE PULIDO EN 1 PASO

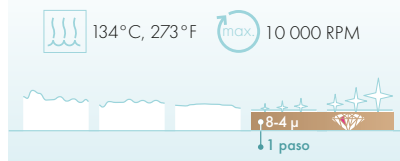

- Pulidores de diamante aglutinado en silicona flexible para uso en restauraciones dentales.
- Uso como pulidor general en restauraciones de composites y cerámicas.
- Pulidor ideal para anteriores. Alto brillo en un solo paso.
- COD: 021830 Kit surtido con 6 pulidores
- COD: 021835/38 Repuesto con 5 pulidores (copa o punta)

### NOBILIS + UNICUS

SISTEMA DIAMANTADO DE PULIDO EN 2 PASOS

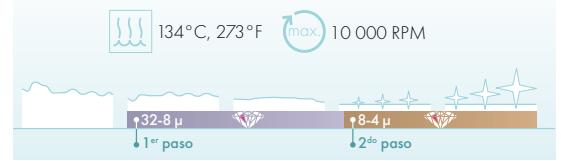


- Pulidores de diamante aglutinados en silicona flexible para uso en restauraciones dentales.
- Uso como pulidor general en restauraciones de composites de todo tipo y cerámicas de todo tipo feldespáticas, zirconia y disilicato de litio.
- NOBILIS Contorneado y pulido / UNICUS alto brillo
- COD: 021819 Kit surtido con 6 pulidores

## PULIDORES PARA COMPOSITOS

### MAXIMUS


SISTEMA DIAMANTADO DE PULIDO EN 1 PASO

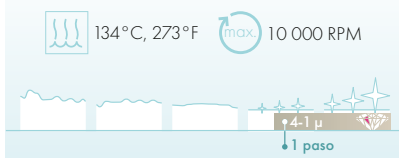

- Pulidores de diamante aglutinado en silicona flexible para uso en restauraciones dentales.
- Para uso general en restauraciones de composites y cerámicas híbridas.
- Pulido rápido y efectivo. Ultra brillo en un solo paso.
- COD: 021840 Kit surtido con 6 pulidores

### DELUXE


SISTEMA DIAMANTADO DE PULIDO EN 2 PASOS

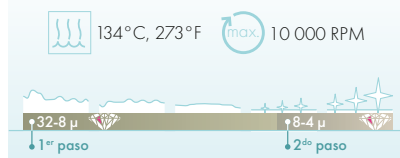

- Pulidores de diamante aglutinado en silicona flexible para uso en restauraciones dentales.
- Para uso general en restauraciones de composites, compómeros y cerámicas híbridas.
- Doble combinación de diamante para mayor resultado estético y alto brillo.
- COD: 021850 Kit surtido con 6 pulidores

### C.G.I.


SISTEMA DE PULIDO EN 3 PASOS

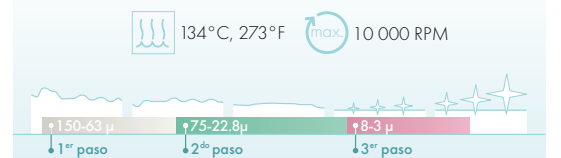

- Pulidores de abrasivos especiales aglutinados en silicona flexible para uso en restauraciones dentales.
- Uso como pulidor general en restauraciones de composites, compómeros e ionomeros vitreos de todo tipo.
- Contorneado, pulido y alto brillo
- COD: 021800 Kit surtido con 12 pulidores
- COD: 021801 al 07: Repuesto con 5 pulidores (punta o copa o disco)

## ZIRCO1

SISTEMA DIAMANTADO DE PULIDO EN 1 PASO

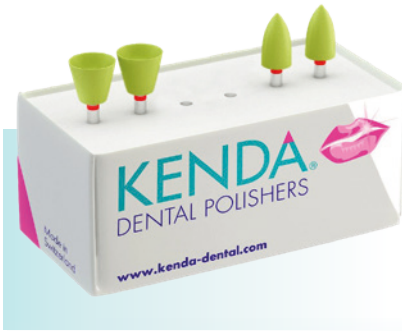

134°C, 273°F max. 15 000 RPM



- Pulidores de diamante aglutinado en silicona flexible para uso en restauraciones dentales.
- Uso como pulidor general en restauraciones de Zirconia y todo tipo de cerámicas.
- Pulidor de Alta Gama. Ideal para suavizar ajustes intraorales de restauraciones.

• COD: 021860 Kit surtido con 4 pulidores

## ZIRCOVIS

SISTEMA DIAMANTADO DE PULIDO EN 2 PASOS



134°C, 273°F max. 10 000 RPM



- Pulidores de diamante aglutinado en silicona flexible para uso en restauraciones dentales.
- Uso como pulidor general en restauraciones de Zirconia, cerámicas de todo tipo
- Ideal para suavizar ajustes intraorales. Reduce el deterioro y la fractura de las restauraciones

• COD: 021865 Kit surtido con 6 pulidores

## SISTEMAS DE PULIDO

• **1 PASO:** se da con un solo tipo de pulidor, generalmente de silicona+ diamante. Se obtienen buenos resultados al alterar la presión de pulido, el pre pulido y contorneado de superficie se da con mayor presión y el pulido a alto brillo se da disminuyendo la presión suavemente.

• **2 PASOS:** se da con dos tipos de pulidores, el primero con abrasivo de grano medio para lograr el contorneado y pre pulido de las superficies, y un segundo de grano fino para el pulido de alto brillo.

• **3 PASOS:** se da con tres tipos de abrasivos diferentes. El primero es para remover el exceso de material y contornear la restauración preparando para el pulido, luego sigue el pulido para suavizar la superficie dejando un brillo satinado, el paso final es con grano fino para un pulido de alto brillo.

## FORMAS DE PULIDORES

• **PUNTAS** esta forma es ideal para las áreas cervicales y oclusales y alivios oclusales

• **COPAS** ideales para cúspides en posteriores, sectores proximales y en anteriores para sectores bucal, lingual y palatal.

• **DISCOS** son ideales para incisivos, restauraciones grandes, bordes incisales y áreas interproximales.

## Z-SERIES

SISTEMA DIAMANTADO DE PULIDO EN 3 PASOS



LAB

max. 10 000 RPM



- Pulidores de diamante abrasivos aglutinado en silicona rígida para uso en laboratorios dentales.
- El preciso ajuste de las prótesis y su acabado correcto evitan fracturas y minimizan la abrasión del esmalte antagonista.


• COD: 021900 Kit surtido con 9 pulidores

• COD: 021901 Repuesto con 3 pulidores punta

• COD: 021902 Repuesto con 3 pulidores disco

## WHEEL & KNIFE

SISTEMA DIAMANTADO DE PULIDO EN 2 PASOS

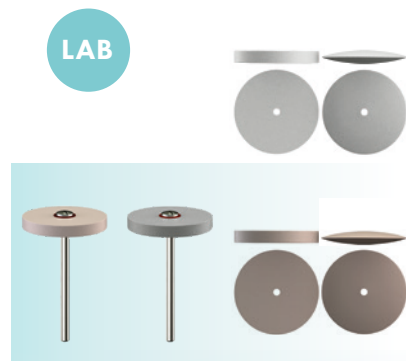

LAB

max. 20 000 RPM



- Pulidores de abrasivos aglutinados en silicona flexible para uso en el pulido y conformado anatómico de prótesis dentales.
- Para cerámicas clásicas de silicato
- Rápidos resultados en superficies grandes.

• COD: 021915/18 Kit con 100 pulidores rueda

• COD: 021916/19 Kit con 100 pulidores disco


## ACRYLIC BLUE

SISTEMA DE PULIDO EN 3 PASOS



LAB

max. 15 000 RPM

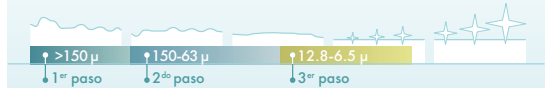

- Pulidores de abrasivos aglutinados en silicona flexible para uso en el pulido y conformado anatómico de prótesis dentales acrílicas en forma secuencial.
- Sistema de pulido duradero y costo eficiente. Comprobado a través de los años

• COD: 021930 Kit surtido con 6 pulidores

• COD: 021931/34/37: Repuesto x 5 pulidores

# TABLA DE REFERENCIAS

PRODUCTO APLICACIÓN		FLEXIB.	CONTORNEADO Superficie rugosa	ACABADO Y PULIDO Superficie lisa	ACABADO ULTRA BRILLO Superficie brillante
<b>MÚLTIPLES MATERIALES</b>					
CONSULTORIO RA - vástago de acero - múltiples usos	NOBILIS	Composite, porcelana y cerámicas híbridas	Flexible	32-8 $\mu$	Paso 1
	UNICUS	Composite, porcelana y cerámicas híbridas	Flexible		8-4 $\mu$ Paso 1
<b>COMPOSITES</b>					
	MAXIMUS	Composites y cerámicas híbridas	Flexible		4-1 $\mu$ Paso 1
	DELUXE	Composites, compómeros y cerámicas híbridas	Flexible	32-8 $\mu$	Paso 1 8-4 $\mu$ Paso 2
	C.G.I.	Composites universales, compómeros y ionómeros vitrios	Flexible	150-63 $\mu$ Paso 1	75-22.8 $\mu$ Paso 2 8-3 $\mu$ Paso 3
<b>CERÁMICAS</b>					
	ZIRCO 1	Cerámicas de óxido y silicato: optimizado para zirconio	Duro	32-8 $\mu$	Paso 1
	ZIRCOVIS	Cerámicas de óxido y silicato: optimizado para zirconio	Duro	69-32 $\mu$	Paso 1 32-8 $\mu$ Paso 2
<b>CERÁMICAS</b>					
LABORATORIO	Z-SERIES	Cerámica (disilicato de circonio, alúmina y litio, etc)	Duro	164-69 $\mu$	Paso 1 69-32 $\mu$ Paso 2 32-8 $\mu$ Paso 3
	W&K	Cerámica de silicato	Flexible	150-63 $\mu$	Paso 1 75-22.8 $\mu$ Paso 2
<b>ACRÍLICO</b>					
	ACRYLIC BLUE	Para dentaduras acrílicas	Flexible	>150 $\mu$ Paso 1	150-63 $\mu$ Paso 2 12.8-6.5 $\mu$ Paso 3



El diamante simboliza que el producto específico está impregnado de diamante. Los pulidores de diamantes son los más eficientes, reduciendo el tiempo de pulido y logrando los mejores resultados de pulido de la superficie y valores de brillo.



Tamaños de grano especificada para cada paso según normas ISO. Las propiedades de corte de un mismo tamaño de grano varían en función de la forma y de las partículas abrasivas.

Tenga en cuenta que la tabla sólo sirve de orientación general y facilita la elección del producto. Los resultados del pulido pueden variar dependiendo de la composición específica del material restaurador pulido. La presión aplicada y la velocidad de rotación influyen en el resultado del pulido. Sujeto a cambios (mejoras del producto). Salvo error u omisión.



REPRESENTANTE EN ARGENTINA  
Paraguay 3026 (1425), CABA  
Tel: (011) 49629000  
info@dental-medrano.com.ar  
www.dentalmedrano.com

Atención al usuario  
PROFESSIONAL CENTER  
M. T. de Alvear 2063 (1122), CABA  
Tel: (011) 4821 3724 / 4825 6202  
center@dental-medrano.com.ar

Atención al usuario  
DENTAL MEDRANO DIRECTO  
M. T. de Alvear 2159 (1122), CABA  
Tel: (011) 4821 6008  
directo@dental-medrano.com.ar

Productos disponibles en nuestra red de distribuidores nacionales (vea en [www.dentalmedrano.com](http://www.dentalmedrano.com)). Las imágenes son de carácter ilustrativo.



T +41 (0)71 757 53 00 / F +41 (0)71 757 53 01 / [www.kenda-dental.com](http://www.kenda-dental.com)  
Coltène/Whaledent AG - Feldwiesenstrasse 20, 9450 Altstätten/Switzerland

